

# SAFE style ZONE 7.0

## PROCESSO DI DISINFEZIONE USANDO IL CONCENTRATO SAFE ZONE 7.0



### RISCIACQUARE

Prima di disinfettare, rimuovere qualsiasi contaminazione visibile di rilievo risciacquando gli strumenti.



### VERSARE L'ACQUA

Versare l'acqua nel contenitore vuoto (acqua di rubinetto pulita o acqua distillata), si consiglia di utilizzare acqua che è stata lasciata riposare per almeno un'ora.



### DILUIRE


Dosare una quantità appropriata di Safe Zona 7.0 Style concentrato (secondo la tabella sottostante) e aggiungerlo a un contenitore di vetro con acqua.

Esempio: per ottenere una concentrazione dell'1%, versare 990 ml di acqua e aggiungere 10 ml di concentrato.



### IMMERGERE

Immergere gli utensili e gli strumenti posti su un piatto/colino nella soluzione

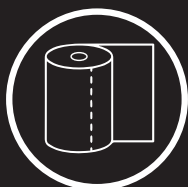

### ASCIUGARE

Lasciare asciugare gli strumenti disinfettati o asciugarli con un tovagliolo di carta monouso.

*La soluzione può essere preparata in anticipo in un contenitore più grande e poi versata.*



CONCENTRATO



PER OGNI  
TIPO DEGLI STRUMENTI



DISINFETTA  
IN 5 MINUTI



AMPIO SPETTRO  
D'AZIONE

**PRODOTTO  
ALLA FINE?**

Fai la scansione del codice  
QR e ordina ora!



### TABELLA DELLE DILUIZIONI

	soluzione per immersione	soluzione per la disinfezione delle superfici	tempo
Capacità battericida	0,65% condizioni sporche	1,25% condizioni sporche	5 minuti
Capacità fungicida	1,0% condizioni sporche	1,5% condizioni sporche	15 minuti
Funghi simili al lievito	1,0% condizioni sporche	1,5% condizioni sporche	15 minuti
Virucidità contro Adenovirus, norovirus murino e virus Vaccinia	2,4% condizioni sporche	2,4% condizioni sporche	5 minuti
Capacità sporicida	2,0% condizioni sporche	2,0% condizioni sporche	60 minuti

**1L di concentrato produce circa 154L di soluzione finita**